



Balon para extracción de piedras

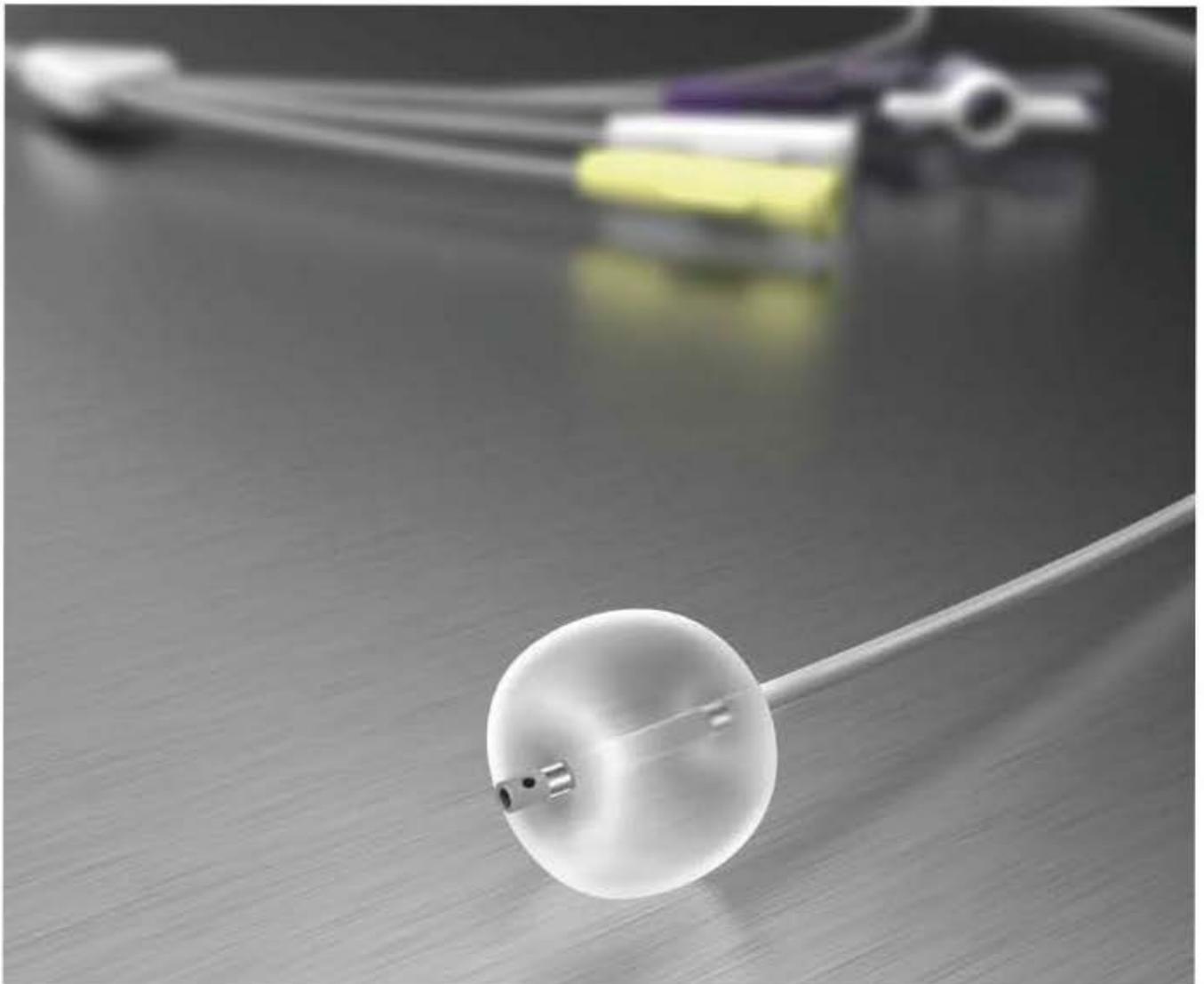

Uso / Eliminación de cálculos en el tracto biliar, incluidos lodos biliares y cálculos biliares residuales que quedan en el tracto biliar después de la litotricia mecánica

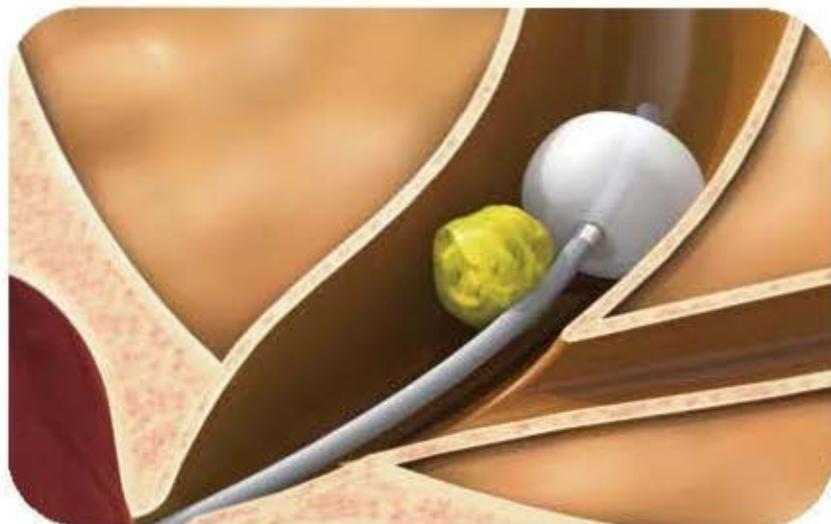


Balon para extracción de piedras

Características

- El diseño innovador de tres lúmenes (lúmenes para alambre guía, inyección e inflación) hace que la inserción y la radiografía sean más fáciles y convenientes.



- El diseño único del catéter afilado mejora la inserción en la papila
- Globo importado con resistencia a explosiones que puede ayudar a mejorar la seguridad de la dilatación.

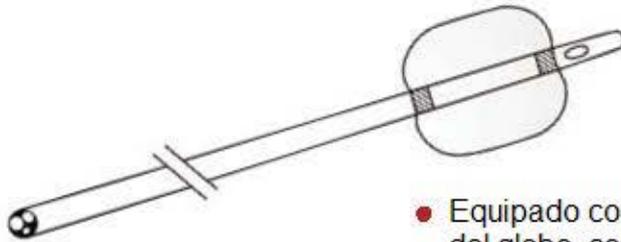

- Equipado con marcas radiopacas en ambos extremos del globo, conveniente para observar bajo rayos X
- Expanda el canal para que el medio de contraste pase más suavemente

Especificaciones

Modelo	Diametro endoscopio (mm)	O.D. (mm)	Longitud (mm)	Tamaño Balon (mm)
VDK-BAL-23-8.5/11.5/15-B	≥ 3.2	8.5/11.5/15	2000	7.5Fr
VDK-BAL-23-9/12/15-B	≥ 3.2	9/12/15	2000	7.5Fr
VDK-BAL-23-10/13/16-B	≥ 3.2	10/13/16	2000	7.5Fr

★ Especificaciones comunes para CPRE